




Snore Circle

El Antironquidos Inteligente

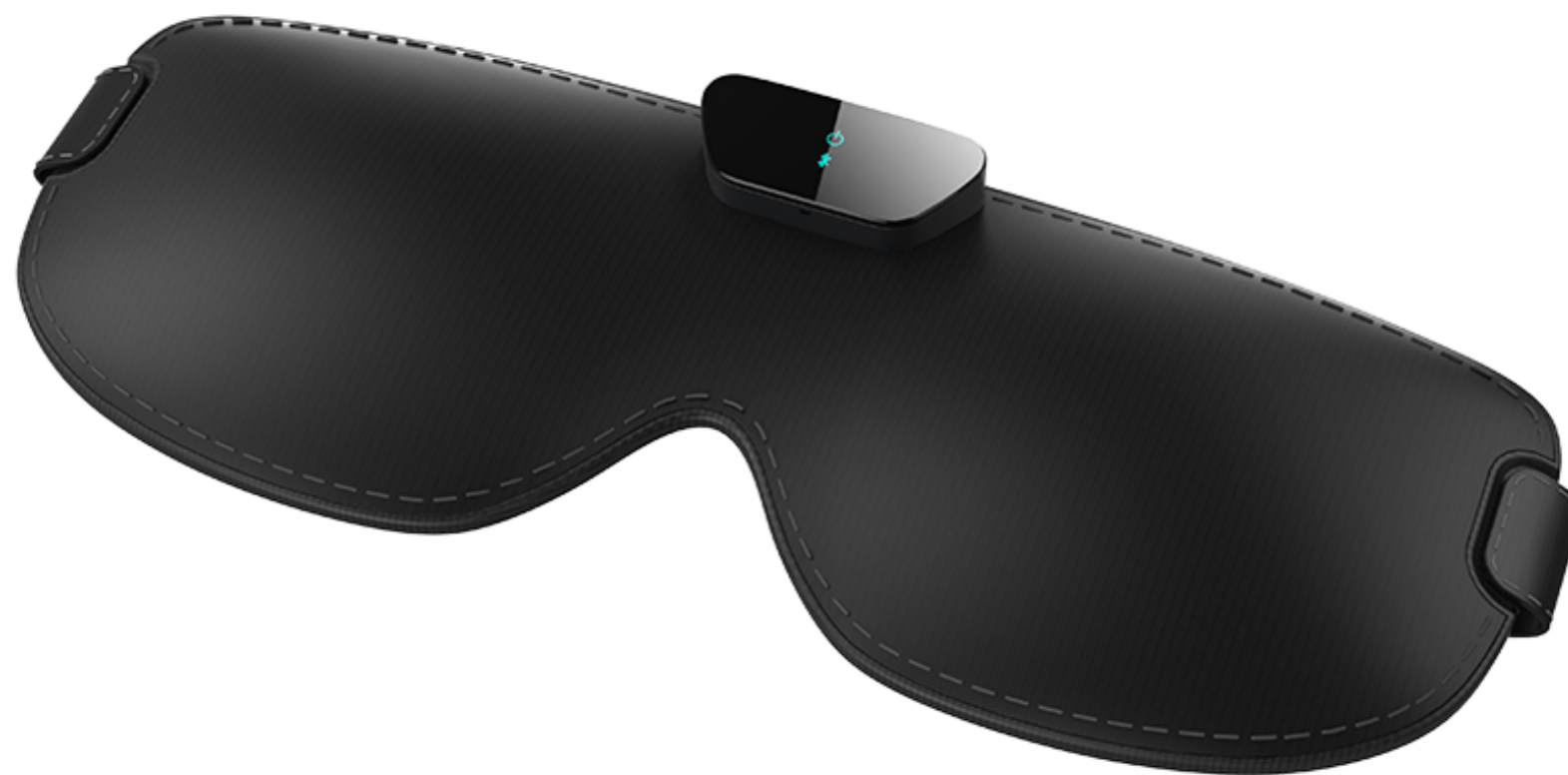

Instrucciones



Comprobar el buen funcionamiento de la máscara Snore Circle:

Después de encender el producto y llevarlo puesto, inicie continuamente un sonido de ronquidos en un ambiente tranquilo y sentirá una vibración débil.

Visualización de la batería:

Mientras el producto está encendido, simplemente pulse el botón FUNC para confirmar el nivel de carga de la batería y compruebe el color de la luz LED de encendido.

1. La luz de encendido en rojo significa batería baja, por favor recárgala. Por favor, cárgalo antes de usarlo. De lo contrario, podría apagarse automáticamente.
2. La luz de encendido en verde significa que la batería está cargada.
3. Puedes obtener el porcentaje restante exacto de la batería conectándote con la aplicación Snore Circle en tu Smartphone.



Recomendaciones sobre la batería:

1. La batería de litio recargable incorporada se puede cargar a través de los cargadores de teléfono y de la conexión USB del ordenador.
2. Se puede cargar completamente en dos horas. Después de una carga completa, la batería dura dos noches. Sugerimos que las personas con alta cadencia de ronquido lo carguen todos los días.
3. Una vez que está la batería completamente cargada, el indicador de encendido se mantiene verde.



Encendido:

Pon la pestaña en ON para encender el equipo.

Después de encenderlo, el indicador de Bluetooth parpadeará durante 10 segundos. El flash desaparecerá si no se conecta a tu teléfono.

Después de comprobar que el indicador de alimentación permanece verde, ponte la máscara y acuéstate para descansar.

Para mantener a todos dormidos y evitar molestias de luz, el LED de encendido se apagará automáticamente.

Es muy importante que te asegures de que la unidad principal esté bien pegada a la frente.

Apagado:

Ponga la pestaña en la posición OFF para apagar el dispositivo. Y todas las luces indicadoras se apagarán.

Sugerencia técnica:

Si el producto no se usa correctamente, afectaría la precisión del reconocimiento del ronquido y la intervención física. Por lo tanto, una vez que el producto esté encendido, úsalo correctamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.





Principio de funcionamiento:

1. El producto detecta e identifica con precisión los sonidos del ronquido a través de la tecnología de conducción ósea.
2. Una vez que el ronquido es reconocido, nuestro producto inteligente ofrece intervención física a través de 36 niveles de diminutas vibraciones prácticamente imperceptibles a los usuarios que duermen.
3. Para ver si este producto mejora su sueño, puede registrar y rastrear el sonido o la frecuencia de los ronquidos a través del producto App, observaciones familiares, su propia percepción, grabaciones, etc. y comparar los cambios.



Conexión con la aplicación:

La aplicación SnoreCircle está disponible en:

Sistema iOS: Iphone 4S o posterior

Sistema Android: 4.3 o posterior, con Bluetooth 4.0

Cómo descargar la aplicación:

iOS: ve a App Store y buscar Snore Circle

Android: ve a Google Play y busca Snore Circle

Características de la aplicación de SnoreCircle:

- Podrás ver los tiempos de ronquidos, los tiempos de intervención y la tasa de paro de ronquidos.
- Podrás ver la calidad de tu sueño con una tabla, un gráfico y un cuadro detallado.
- Ver archivo histórico de ronquidos.
- Ajustar la intensidad y sensibilidad de la intervención física, o activar la función de retardo de parada de ronquidos para personalizar el producto.



Cómo usar la aplicación:

1. Una vez instalada la aplicación, enciende el Bluetooth de tu Smartphone y abre la aplicación. Mientras tanto, asegúrate de que el dispositivo esté encendido y pulsa el botón FUNC para iniciar el Bluetooth que parpadeará en la luz azul. Enlaza el producto con tu teléfono y podrás ver tus ronquidos y la calidad del sueño a través de la aplicación.

2. Configura tu modo de trabajo ideal para el dispositivo:

Es posible que el modo predeterminado no sea adecuado para todos. Recomendamos ajustar el modo por cuenta propia en los primeros días de uso del producto, basándonos en la severidad de los ronquidos del individuo y su historial.

3. Para las personas con sueño ligero, se recomienda no intervenir físicamente durante el ciclo de sueño ligero. Al activar la función de retardo de parada de ronquidos, el producto no interfiere con tu sueño.



Servicio Postventa:

1. La garantía dura dos años a partir de la fecha de compra original para todo el producto.
2. Los daños artificiales están fuera de garantía. Recomendamos encarecidamente una observación del desgaste durante dos semanas. Aproximadamente un 10% de los usuarios necesitan adaptarse al producto para superar la sensación de despertar y de cuerpos extraños.

Precauciones:

1. Usa y almacena el producto dentro de un rango de temperatura específico de -10°C a 50°C. La temperatura extrema puede causar un mal funcionamiento del producto.
2. Evita poner el producto cerca de fuentes de calor, como calentadores, microondas o asadores.
3. Mantenga el producto alejado de golpes o vibraciones fuertes, ya que podría dañarlo.
4. Evita limpiar el producto con productos químicos, detergentes o agua. Manténgalo siempre seco.
5. No retires ni sustituyes la batería de litio incorporada en el producto. Puede dañar el producto. No arrojar el producto al fuego, puede provocar una explosión.
6. Esto no es un juguete. Por favor, colócalo en un lugar adecuado y mantenlo fuera del alcance de los niños. Evita el uso incorrecto por parte de los niños que pueda causar peligros.



Cuanto más utilices Snore Circle, más eficaz será.

Podrás tardar unos días en acostumbrarte a las vibraciones, por lo cual te podrás despertar momentáneamente y también “acordarte”, por la mañana.

Te darás cuenta cada vez menos con el tiempo. Sin embargo, puedes cambiar, en todo momento, la intensidad de la vibración (36 niveles de diminutas vibraciones prácticamente imperceptibles).

Gracias por confiar en Snore Circle

www.snorecircle.es